



СЕРВИС
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

+7 (495) 925-81-50

www.omb.ru

Автоматический
иммунохемилюминесцентный
анализатор

MACCURA® i3000

Maccura Medical Instrument Co., Ltd.,
Китай

ЭКСКЛЮЗИВ

НОВИНКА



ДЛЯ БОЛЬШИХ
ЛАБОРАТОРИЙ

ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ



ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ТОЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ИММУНОХИМИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ

200

позиций
для образцов

2 000

кювет
Единовременная
загрузка

STAT- образцы

быстрый анализ

Замена реагентов на борту

сокращение времени
исследования

Интеллектуальная система вращения пробирок

корректное считывание штрих-кода

В современных условиях нестабильности у лабораторий появилась возможность быстро адаптироваться к повседневным изменениям и получать точные результаты исследований.

Maccura® i3000 – надежное решение для высокопроизводительных лабораторий: еще больше тестов в час при двухмодульном исполнении. Анализатор использует технологию на основе акридинового эфира.



300

тестов/час

600

тестов/час
при двухмодульном исполнении



1

**Модуль
загрузки образцов**

Непрерывная дозагрузка

2

**Аналитический
модуль**

Замена расходных
материалов в режиме работы

3

**Модуль
хранения образцов**

Хранение образцов
при необходимости
дальнейшего разведения

4

**Зона для загрузки
реакционных кювет**

Внесение россыпью

5

**Карусель
реагентов**

с поддержанием постоянной
температуры 2–4 °C

MACCURA i3000

MACCURA® i3000
на www.omb.ru




РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



**RFID-метка
на реагентах**



**Ежедневная
самодиагностика**

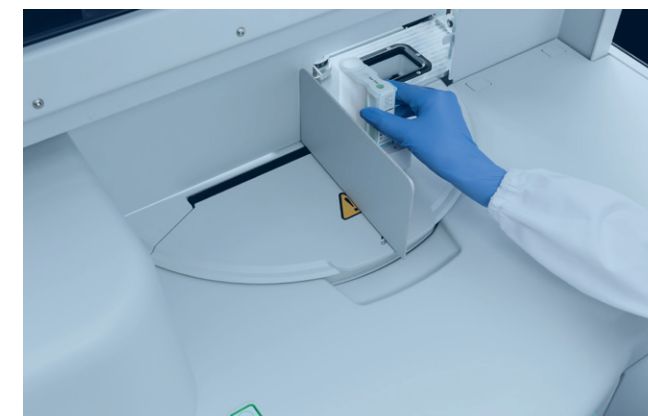

**Отдельный лифт
для непрерывной
дозагрузки реагентов**

**Хемилюминесцентный
субстрат**
Substrate Buffer A&B

Используется для активации метки
эфира акридина, чтобы получить
хемилюминесцентный сигнал.

**Реакционные
кюветы**
Reaction Cuvettes

Используются для проведения
иммунной реакции, разведения,
промывки.

**Очищающий
раствор**
WS Wash Buffer

Используется для промывки
и обслуживания иглы для отходов
и реагентов.

**Промывающий
раствор**
CLIA Wash buffer

Используется для промывки
системы в процессе исследований
и для разведения образцов,
при необходимости.





МЕНЮ ТЕСТОВ

Щитовидная железа

ТТГ
Т3 общий
Т4 общий
Т3 свободный
Т4 свободный
Анти-ТГ
Анти-ТПО
Тиреоглобулин (ТГ)
Т3 реверсивный
Анти-рТТГ

Аллергия

IgE

Костный метаболизм

25-ОН Витамин Д
Паратиреоидный гормон интактный
Кальцитонин в процессе получения РУ
Р1NP (общий N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа)
Остеокальцин

Надпочечники

IGFBP-3
Гормон роста GH в процессе получения РУ

Онкомаркеры

АФП
РЭА
ПСА общий
ПСА свободный
CA 19-9
CA 125
CA 15-3
CA 72-4
HE4
CA 50
CA 242
CYFRA 21-1
ProGRP
SCC
NSE в процессе получения РУ
S-100
PIVKA-II
Гастрин-17
Пепсиноген I
Пепсиноген II

Маркеры воспаления

Прокальцитонин
IL-6 в процессе получения РУ
SAA

Инфекции

HBsAg
Anti-HCV
Anti-TP
HIV Ag/Ab
HBsAb
HBeAg
HBeAb
HBcAb
HEV-IgM
HEV-IgG
HAV IgM
SARS-CoV-2 IgG
SARS-CoV-2 IgM
SARS-CoV-2 Nab
HBV Pre S1
Anti-HBc IgM
2019-nCoV IgM
2019-nCoV IgG

Репродуктивная система

АМГ
Общий бета-ХГЧ
ФСГ
ЛГ
Пролактин
Эстрадиол
Прогестерон
Тестостерон
DHEA-S в процессе получения РУ

Аутоиммунный профиль

Anti-CENP-B
Anti-His
Anti-Rib-P
Anti-Scl-70
Anti-SSA(Ro52)
Anti-dsDNA
Anti-PCNA
Anti-PM-Scl
Anti-AMA-M2
Anti-Nuc
Anti-Jo-1
Anti-SSB(La)
Anti-SSA(Ro60)
Anti-Sm
Anti-Sm/RNP
aCL-P
aCL-A
aCL-G
aCL-M
β2-GP1-P
β2-GP1-A
β2-GP1-M
β2-GP1-G
Anti-MPO
Anti-PR3
Anti-GBM
Anti-gp210
Anti-sp100
Anti-LKM-1
Anti-LC-1
Anti-SLA/LP

Сахарный диабет

С-пептид
Инсулин
IGF-1

TORCH

TOXO IgG
TOXO IgM
HSV 2 IgG
HSV 1 IgG
HSV 2 IgM
HSV 1 IgM
Rubella IgG
Rubella IgM
CMV IgG
CMV IgM

Ревматоидная панель

RF
RF-IgM
RF-IgG
RF-IgA
Anti-CCP

Гипертензия

Альдостерон
АКТГ
Прямой ренин
Кортизол в процессе получения РУ

Пренатальный скрининг

Свободный β-НСГ
PAPP-A

Сердечно-сосудистая система

СК-МВ
Миоглобин
NT-proBNP (N-терминальный натрийуретический пропептид b-типа)
Д-димер
Высокочувствительный тропонин (hs-cTnl)
Высокочувствительный тропонин (hs-cTnT)
Тропонин I
BNP (общий N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа)
GDF-15
Биомаркер ST2
Высокочувствительный CRP

Анемия

Витамин В12
Ферритин
Фолиевая кислота в процессе получения РУ

Другие анализы

NfL
GFAP
CP-IgG
CP-IgM
MP-IgM
MP-IgG

Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2024/22105 от 22.02.2024
Анализатор хемилюминесцентный автоматический Массура i варианты исполнения:
I. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 1000
II. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 3000

* Тесты, выделенные жирным шрифтом, зарегистрированы в качестве медицинского изделия Росздравнадзором (регистрационные номера медицинских изделий: РЗН 2024/22519, РЗН 2024/22518, РЗН 2024/22553, РЗН 2024/22575, РЗН 2024/22046, РЗН 2024/22517, РЗН 2024/22233, РЗН 2024/22552, РЗН 2024/21998, РЗН 2024/22000, РЗН 2024/22010, РЗН 2024/22534, РЗН 2024/22546, РЗН 2024/22009, РЗН 2024/22229, РЗН 2024/22054, РЗН 2024/22053, РЗН 2024/22560, РЗН 2024/22119, РЗН 2024/22055, РЗН 2024/21995, РЗН 2024/22047, РЗН 2024/22262, РЗН 2024/21992, РЗН 2024/22230, РЗН 2024/22255, РЗН 2024/22574, РЗН 2024/22022, РЗН 2024/22254, РЗН 2024/22520, РЗН 2024/22098, РЗН 2024/22278, РЗН 2024/22242, РЗН 2024/22276, РЗН 2024/22241, Г004-00110-00/03809562, Г004-00110-00/03656478, Г004-00110-00/03809645, Г004-00110-00/03876548, Г004-00110-00/04214280, Г004-00110-00/04172997, Г004-00110-00/03992424, Г004-00110-00/03841870, Г004-00110-00/03992510, Г004-00110-00/04059276, Г004-00110-00/03985232, Г004-00110-00/03958956, Г004-00110-00/04202755, Г004-00110-00/04402685, Г004-00110-00/04457787, Г004-00110-00/04437102, Г004-00110-00/04458016, Г004-00110-00/04350801, Г004-00110-00/04275944), остальные — в процессе регистрации.

Информация о зарегистрированных тестах приведена с учетом полученных документов на 01.03.2026 г.

Актуальная информация о зарегистрированных тестах содержится на сайте Росздравнадзора: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>



+7 (495) 925-81-50

omb@omb.ru
zakaz@omb.ru

Больше
на www.omb.ru

